


ESダイレーター


EUS 下ドレナージ用カテーテル拡張器

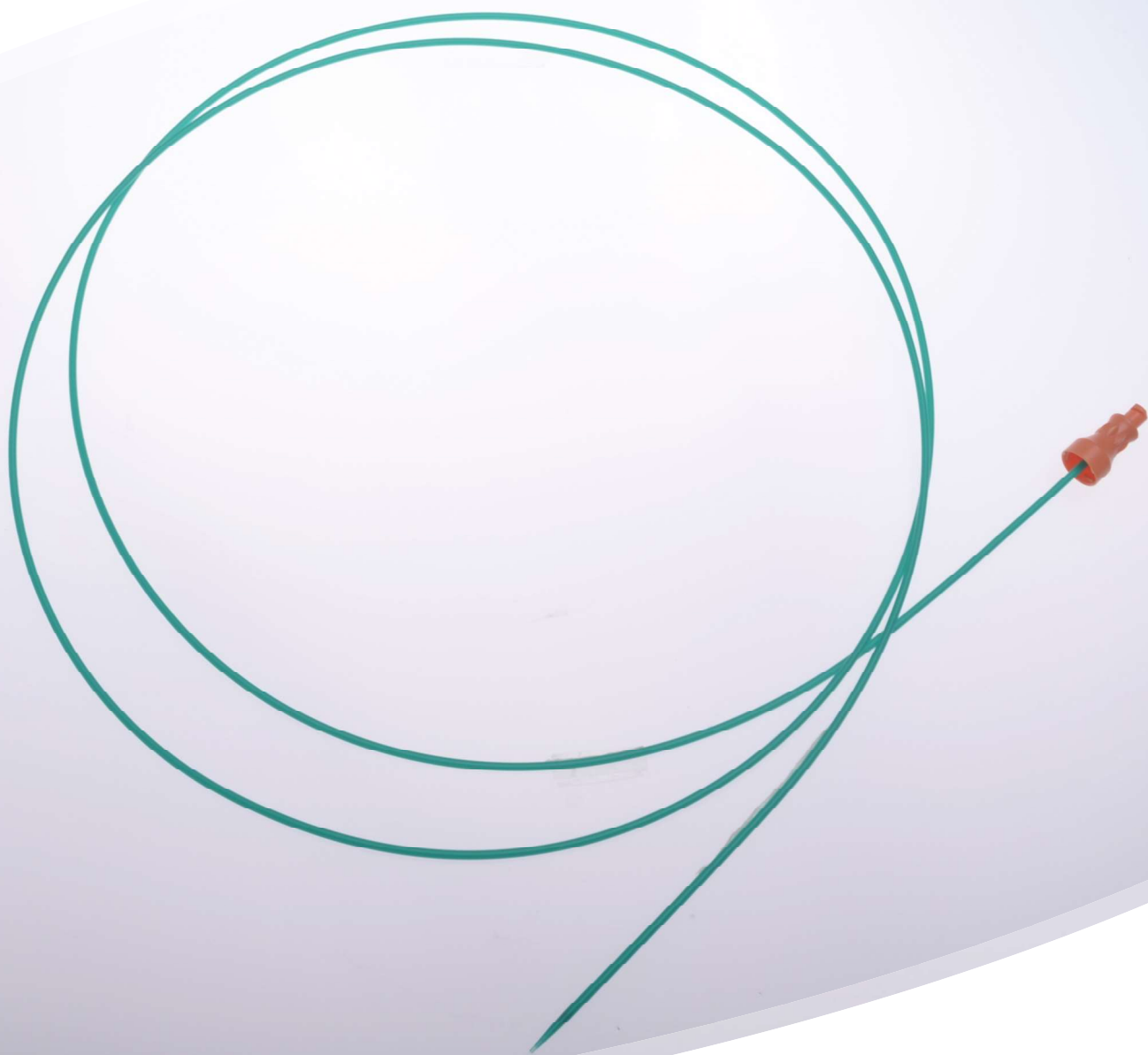

ES Dilator
Effective Dilator for Interventional EUS

キレの良さ

ガイドワイヤのサイズに合わせて先端を肉薄にして段差を小さく設計しました。

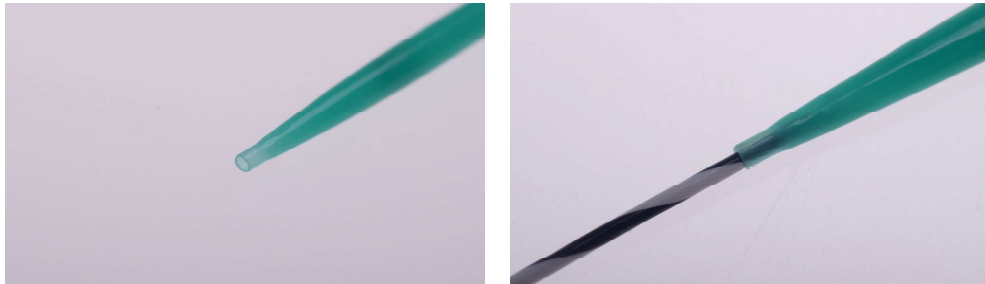


高いプッシュビリティ

剛性のあるシャフトにより高いプッシュビリティが期待できます。
また、先端部の潤滑コーティングにより、挿入がスムーズです。

視認性の良さ

先端から 10 mm の位置にある造影リングにより、透視下で先端位置を確認できます。
造影リングはカテーテル内部にあるので、カテーテルの外側は滑らかです。

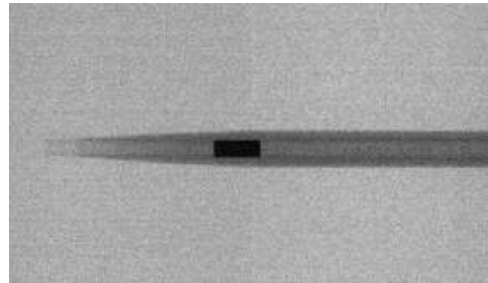

仕様

品番	カテーテル外径	カテーテル有効長	適合ガイドワイヤ	JANコード
DC7P180S	2.45mm (7F)	1800mm	0.46mm (0.018インチ)	4545367073954
DC7F180S	2.45mm (7F)	1800mm	0.64mm (0.025インチ)	4545367057466
DC7R180S	2.45mm (7F)	1800mm	0.89mm (0.035インチ)	4545367057459

■販売名: ES ダイレータ
■認証番号: 225ABBZX00058000

注意 ●本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
●本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL: www.zeonmedical.co.jp

XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。