

DESLIP-Z[®]
For Drug-Eluting Stent
PTCA Balloon Catheter

DESLIP-Z[®] 改 品番

品番	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	品番	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)
ZRNC2008	2.00	8	ZRNC2015	2.00	15
ZRNC2308	2.25	8	ZRNC2315	2.25	15
ZRNC2508	2.50	8	ZRNC2515	2.50	15
ZRNC2808	2.75	8	ZRNC2815	2.75	15
ZRNC3008	3.00	8	ZRNC3015	3.00	15
ZRNC3308	3.25	8	ZRNC3315	3.25	15
ZRNC3508	3.50	8	ZRNC3515	3.50	15
ZRNC3808	3.75	8	ZRNC3815	3.75	15
ZRNC4008	4.00	8	ZRNC4015	4.00	15

DESLIP-Z[®] 改バルーンコンプライアンス

圧atm/Mpa	圧 psi	φ2.0	φ2.25	φ2.5	φ2.75	φ3.0	φ3.25	φ3.5	φ3.75	φ4.0		
4	0.41	59	1.88	2.10	2.20	2.45	2.70	2.95	3.20	3.45	3.70	
5	0.51	73	1.90	2.12	2.26	2.51	2.76	3.01	3.26	3.51	3.76	
6	0.61	88	1.92	2.15	2.32	2.57	2.82	3.07	3.32	3.57	3.82	
7	0.71	103	1.94	2.17	2.37	2.62	2.87	3.12	3.37	3.62	3.87	
8	0.81	118	1.96	2.20	2.42	2.67	2.92	3.17	3.42	3.67	3.92	
9	0.91	132	1.98	2.22	2.46	2.71	2.96	3.21	3.46	3.71	3.96	
10	1.01	147	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	規定圧 (Nominal)
11	1.11	162	2.02	2.27	2.53	2.78	3.03	3.28	3.53	3.78	4.03	
12	1.22	176	2.04	2.29	2.56	2.81	3.06	3.31	3.56	3.81	4.06	
13	1.32	191	2.05	2.31	2.59	2.84	3.09	3.34	3.59	3.84	4.09	
14	1.42	206	2.07	2.32	2.61	2.86	3.11	3.36	3.61	3.86	4.11	
15	1.52	220	2.08	2.34	2.63	2.88	3.13	3.38	3.63	3.88	4.13	
16	1.62	235	2.09	2.35	2.65	2.90	3.15	3.40	3.65	3.90	4.15	
17	1.72	250	2.10	2.36	2.67	2.92	3.17	3.42	3.67	3.92	4.17	
18	1.82	265	2.11	2.37	2.69	2.94	3.19	3.44	3.69	3.94	4.19	
19	1.92	279	2.12	2.38	2.71	2.96	3.21	3.46	3.71	3.96	4.21	
20	2.03	294	2.13	2.39	2.72	2.97	3.22	3.47	3.72	3.97	4.22	
21	2.13	309	2.14	2.40	2.74	2.99	3.24	3.49	3.74	3.99	4.24	
22	2.23	323	2.15	2.41	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	定格破裂圧 (RBP)
23	2.33	338	2.16	2.42	2.77	3.02	3.27	3.52	3.77	4.02	4.27	
24	2.43	353	2.16	2.43	2.79	3.04	3.29	3.54	3.79	4.04	4.29	
25	2.53	367	2.17	2.44	2.82	3.07	3.32	3.57	3.82	4.07	4.32	
26	2.63	382	2.18	2.45	2.85	3.10	3.35	3.60	3.85	4.10	4.35	
27	2.74	397	2.19	2.46	2.88	3.13	3.38	3.63	3.88	4.13	4.38	
28	2.84	412	2.20	2.48	2.90	3.15	3.40	3.65	3.90	4.15	4.40	


斜字は参考値

■販売名:PTCAバルーンカテーテルA
■承認番号:21300BZZ00448000

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社)〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>
XEMEX は日本ゼオン (株) の登録商標です。

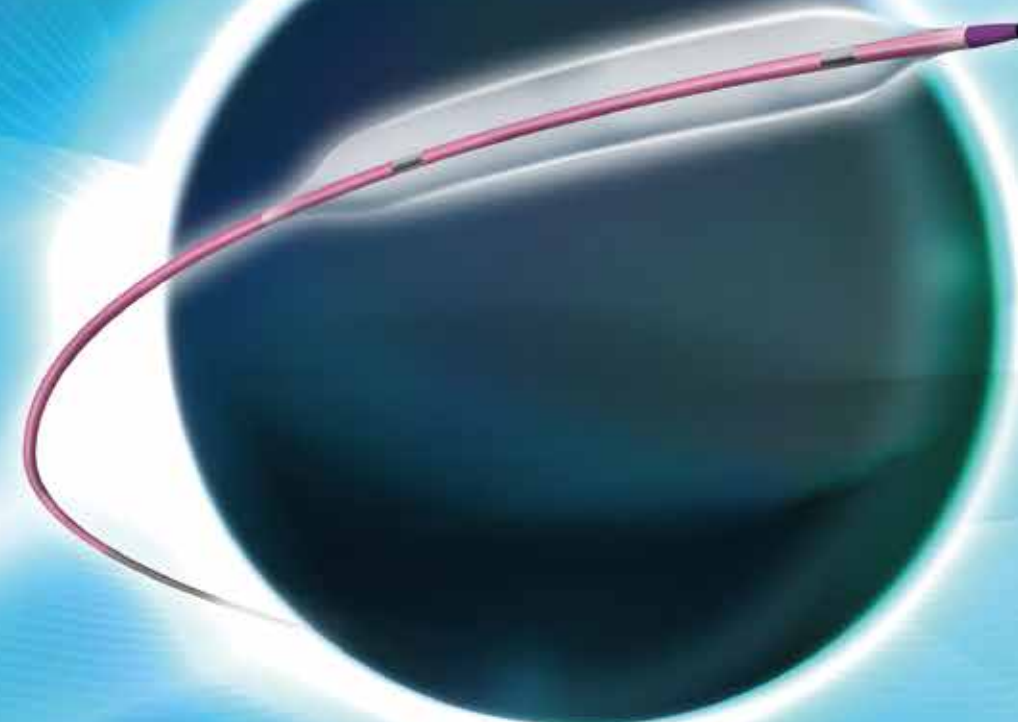

For Drug-Eluting Stent

Nominal 10atm RBP 22atm

ゼオンメディカル株式会社

DESLIP-Z[®] 改：ディスリッパーゼット 改
DESのために開発された
PTCAバルーンカテーテル
DESやISR (In Stent Restenosis) に対応した DESLIP-Z[®] 改


クロス性向上

■ **バルーンプロファイルの細径化**

DESLIP-Z[®]のバルーン素材を継承しながら、独自のラッピング工程によりバルーンロープロファイルを実現しました。

■ **先端Tipの長さを変更**

先端Tipの長さを短くすることにより、GW追従性を向上しました。

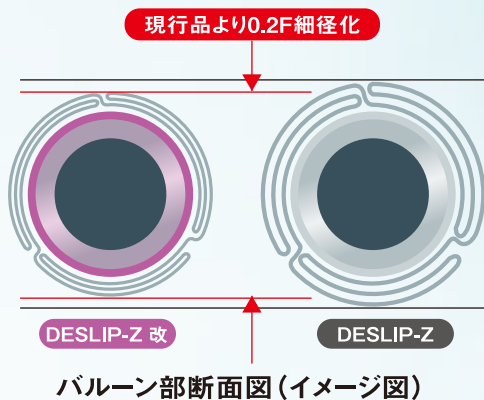

6FガイドングカテーテルKBTの操作性向上

GWポートの細径化(2.8F→2.6F)により、6FガイドングカテーテルのKissing Balloon Technique の操作性を向上しました。



挿入性向上

先端Tipからディスタルシャフトまでを親水性コーティングすることにより挿入性を改善しました。



High Pressure/Low Compliance

高耐圧と高圧域でのコンプライアンスを抑えた設計

- 規定圧 (Nominal) 10atm (1.01MPa)
- 定格破壊圧 (RBP) 22atm (2.23MPa)

