


Deflectable Sheath
ZEO WING
ZEO WING

**XIEM
EX**

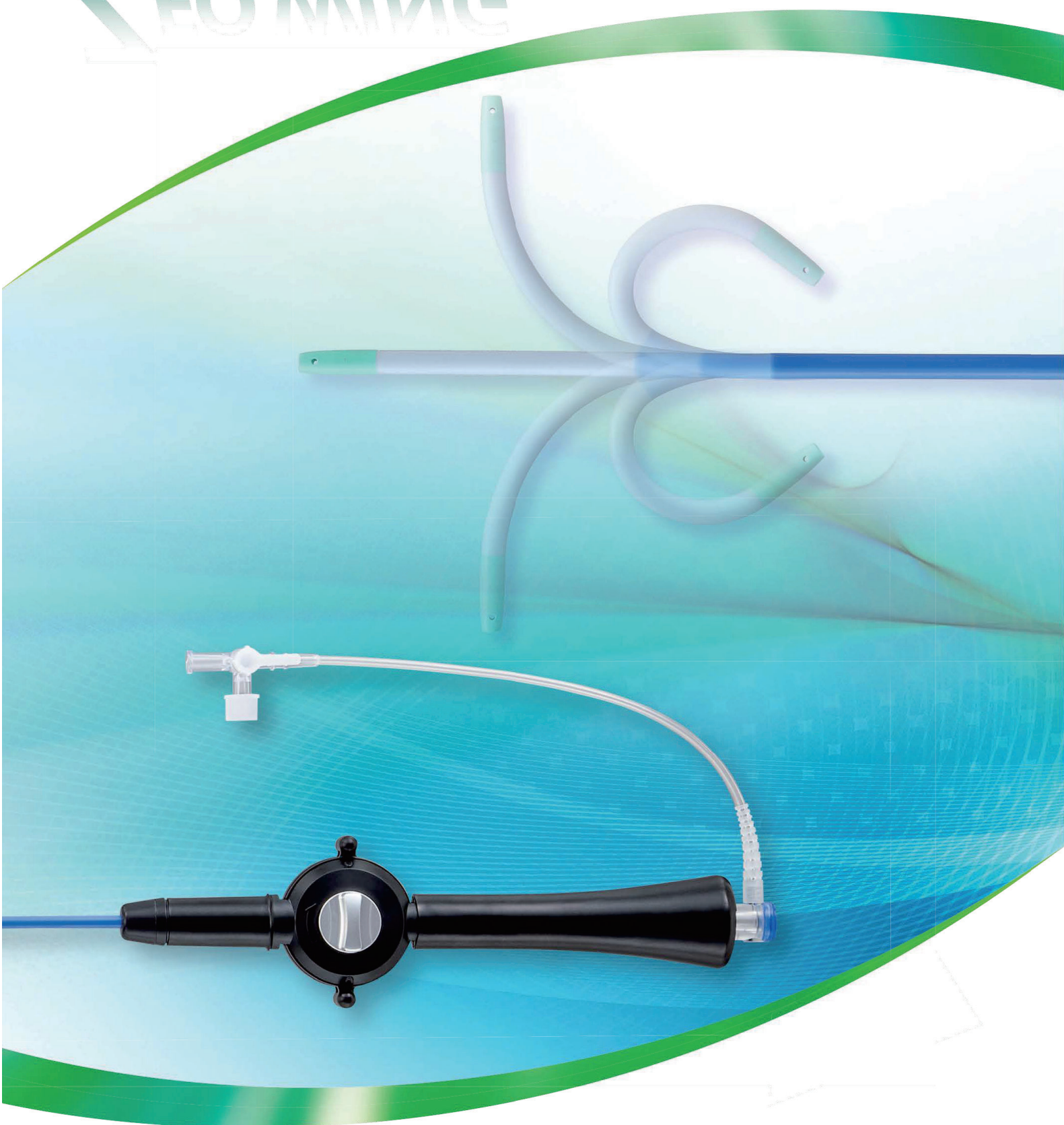

ゼオンメディカル株式会社



直感的な操作が可能な ウィング式ハンドル

EP カテと同様の、
直感的な操作が可能なウィング式のハンドル。
左右の手どちらでもハンドリング可能。

キレの良いシース先端

シースとダイレータの段差を極限まで低減したことで、
カニキュレーションをスムーズに。
ハンドル操作に合わせた先端のクイックレスポンスを実現。

ダイレータ内径に段差を設けることで、
ブロッケンブロー針が飛び出さないよう
設計を改良。

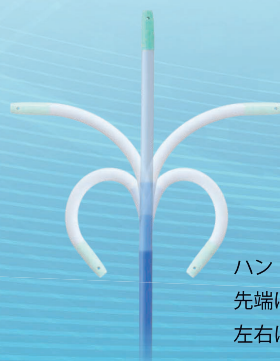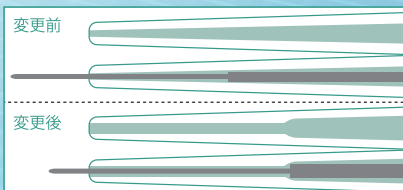


ハンドルの操作に合わせ、
先端はレスポンス良く
左右に曲げることが可能。

透明なシースハブ

透明なため空気塞栓や血栓も見つけやすい、
耐久性と操作性を実現した止血弁。



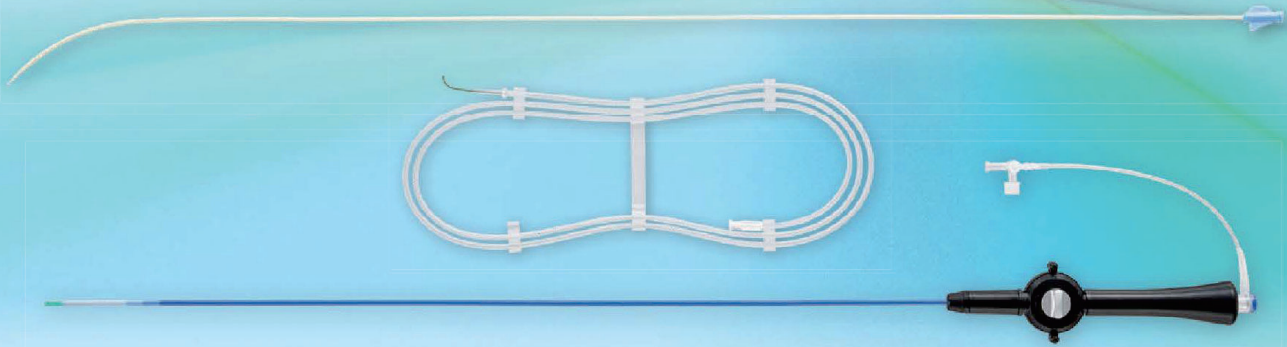

	ES1S06187	ES1M06187
シースカーブサイズ	S (16.8mm)	M (22.4mm)
シース外径	3.8mm	3.8mm
シース内径	3.0mm (9F)	3.0mm (9F)
シース有効長	610mm	610mm
ダイレータ外径	2.95mm	2.95mm
ダイレータ先端内径	0.84mm	0.84mm
ダイレータ有効長	839mm	839mm
ガイドワイヤ外径	0.032inch (0.81mm)	0.032inch (0.81mm)
ガイドワイヤ有効長	1800mm	1800mm
JAN コード	4545367053925	4545367053932

付属品
 ・ダイレータ
 ・J型ガイドワイヤ

販売名：先端可動シース A
 特定保健医療材料請求分類：001 血管造影用シースイントロデューサーセット (5) 遠位端可動型
 医療機器承認番号：22300BZX00462000
 クラス分類：IV

注 意

- 本品のご使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読みください。
- 本品の仕様・外装等については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
 URL:www.zeonmedical.co.jp

XEMEXはゼオンメディカル株式会社のハウスマークです。
 XEMEX、ZEO WINGは日本ゼオン株式会社およびグループ会社の商標または登録商標です。