


# ESダイレーター


EUS 下ドレナージ用カテーテル拡張器

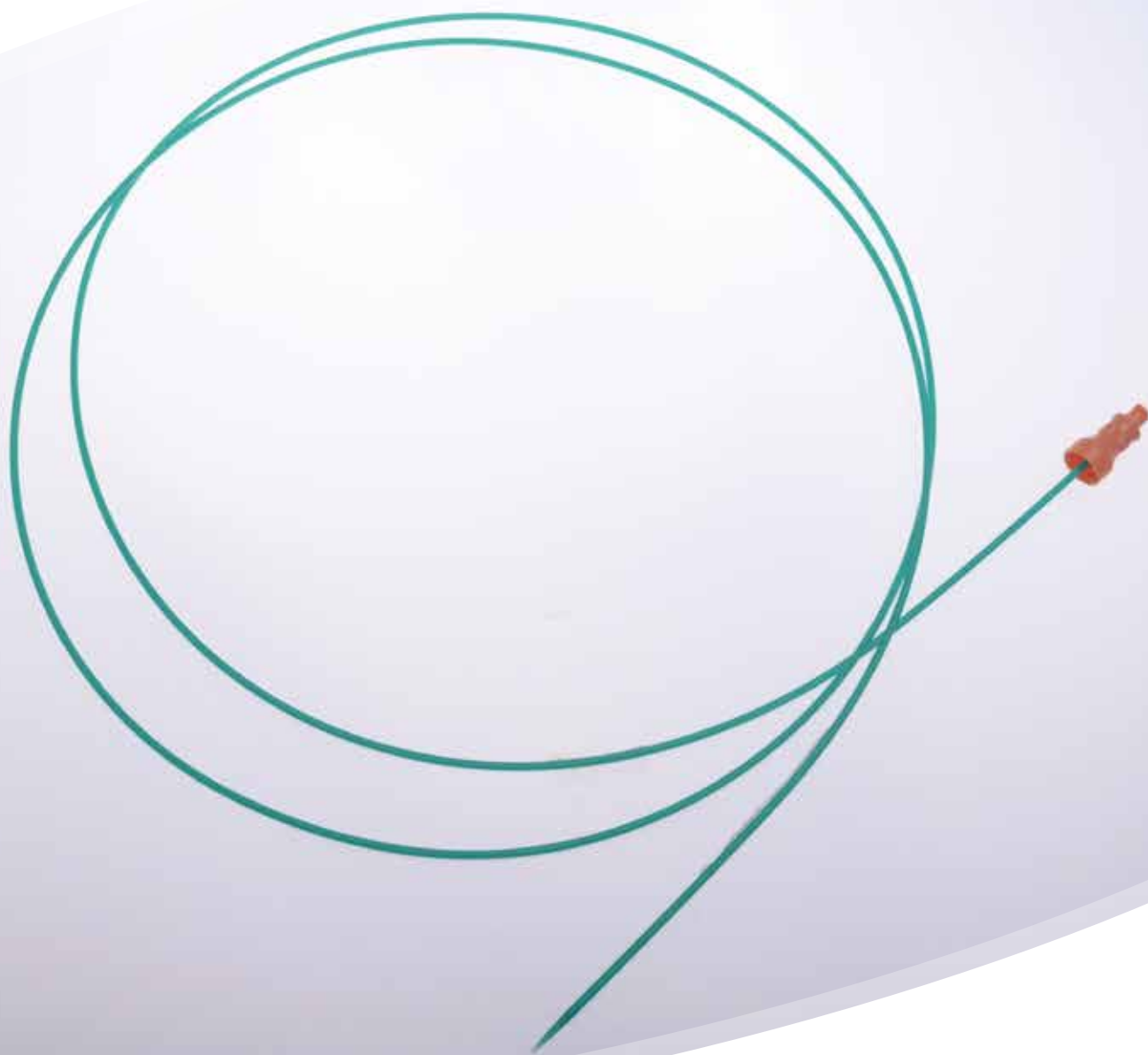

**ES Dilator**  
Effective Dilator for Interventional EUS

## キレの良さ

ガイドワイヤのサイズに合わせて先端を肉薄にして段差を小さく設計しました。カテーテルの先端径は 0.035 インチ用は 3.3F、0.025 インチ用は 2.5F です。

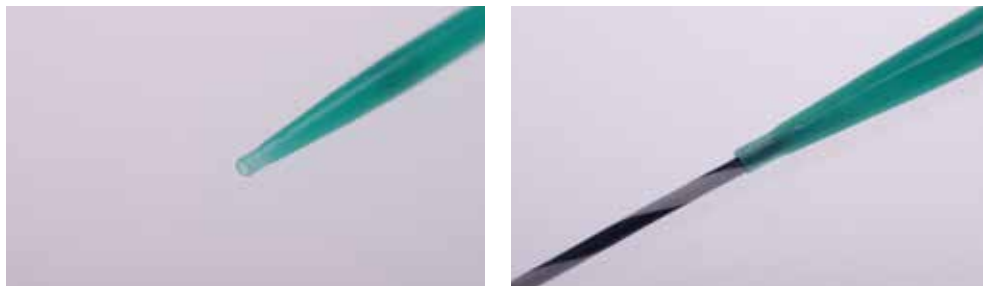


## 高いプッシュアビリティ

剛性のあるシャフトにより高いプッシュアビリティが期待できます。また、先端部の潤滑コーティングにより、挿入がスムーズです。

## 視認性の良さ

先端から 1cm の位置にある造影リングにより、透視下で先端位置を確認できます。造影リングはカテーテル内部にあるので、カテーテルの外側は滑らかです。

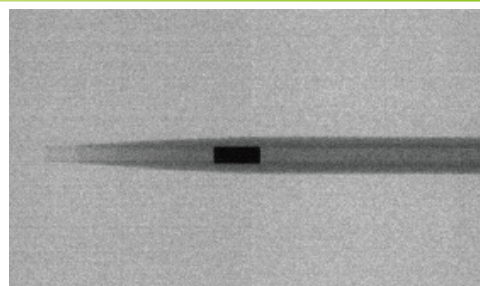

### 仕様

品番	カテーテル外径	カテーテル有効長	適合ガイドワイヤ	JANコード
DC7R180S	2.45mm (7F)	1800mm	0.89mm (0.035インチ)	4545367057459
DC7F180S	2.45mm (7F)	1800mm	0.64mm (0.025インチ)	4545367057466

■販売名: ES ダイレーター  
■認証番号: 225ABBZX00058000

#### 注意

- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

## ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2  
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270  
URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。