


エクストラクション バルーン カテーテル

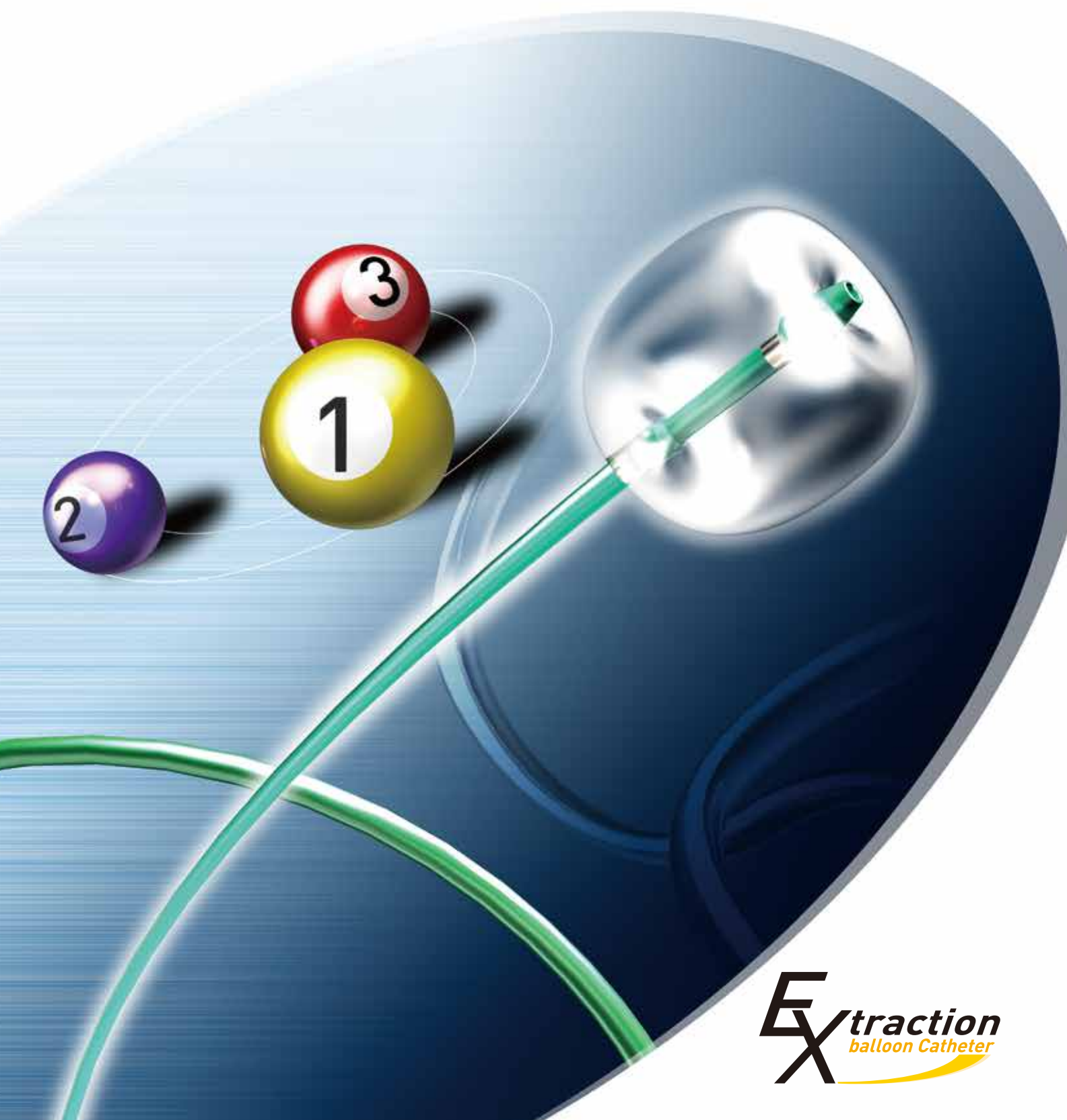

EXtraction
balloon Catheter

バルーン径が調節可能な大バルーン

- 5mLのエア注入でバルーン径が約18mmとなり、胆管拡張症例でも対応可能です。
- バルーン径は付属の専用シリンジでコントロールが可能です。



操作性の向上を目指したカテーテル

- プッシュピリティーと耐キンク性の向上を目指したカテーテルチューブです。
- 3ルーメン構造によりガイドワイヤ使用時も造影剤注入口から造影剤を注入できます。
- カテーテル先端は5.5Fにテーパ化され柔軟性と挿入性の向上を目指しています。
- 側孔の位置はバルーンの先端側（ディスタルタイプ）と手元側（プロキシマルタイプ）の2品種あります。
- バルーンの両端にX線透視マーカがありバルーンの間隔が分かりやすくなっています。



品 番	バルーン拡張径	全 長	カテーテル主部外径	カテーテル先端部外径	適合鉗子口径	適合ガイドワイヤ
EXT71820D (ディスタルタイプ)	18mm	200cm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.2mm以上	0.89mm (0.035インチ)
EXT71820P (プロキシマルタイプ)	18mm	200cm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.2mm以上	0.89mm (0.035インチ)

- 注 意**
- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
 - 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。
- 販 売 名:エクストラクション バルーン カテーテル
 ■承認番号:21400BZZ00507000
 ■特定保険医療材料請求分類:胆道結石除去用カテーテルセット (2) 経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーメン の一部

指向性水流による排石機能（石流しEXバルーン）

- 指向性水流が十二指腸側へ向かってらせん状に流れることにより、遺残しやすい中切開以下の乳頭処置後症例や胆泥胆砂に対しての排石性向上を目指しました。
- ガイドワイヤルーメンを廃して造影ルーメンと統合し、ダブルルーメンカテーテルとすることで、3.2mmの内視鏡鉗子チャンネル対応のまま、これまででない大口径の送水造影ルーメンを実現。生理食塩液や造影剤の注入抵抗を低減して、ハイフロー化を図りました。



品 番	バルーン拡張径	全 長	カテーテル主部外径	カテーテル先端部外径	適合鉗子口径	適合ガイドワイヤ
EXT71820F	18mm	200cm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.2mm以上	非対応

- 注 意**
- 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
 - 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。
- 販 売 名:エクストラクション バルーン カテーテル
 ■承認番号:21400BZZ00507000
 ■特定保険医療材料請求分類:胆道結石除去用カテーテルセット (2) 経内視鏡バルーンカテーテル ①ダブルルーメン の一部

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

[本 社] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
 URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>

XEMEXは日本ゼオン(株)の登録商標です。