


XIEM
EX

オフセットバルーンカテーテル

販売名:エクストラクションバルーンカテーテル プラス

Epoch in Balloon Catheter

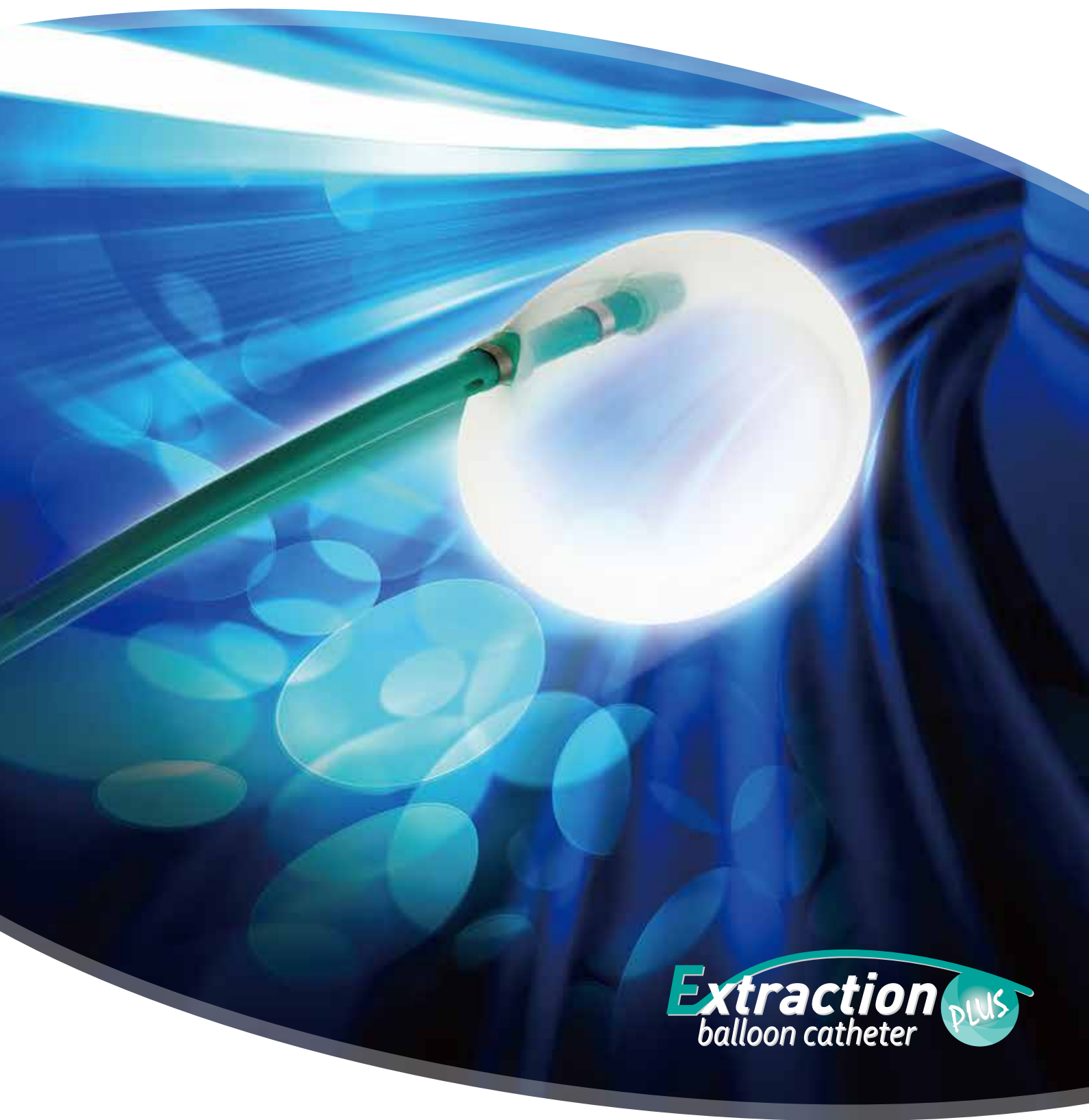

Extraction PLUS
balloon catheter

ゼオンメディカル株式会社



▶ 18mm



▶ 15mm




▶ 11mm



優れた採石性能

- 胆管内で結石をかき出す際、段階的にバルーン径を小さくした状態で、結石などから外圧を受けてもバルーンの変形がほとんどありません。したがって、最後までしっかりと結石を捕捉して十二指腸内にかき出すことが可能です。


品番	バルーン		全長	カテーテル 主部外径	カテーテル 先端部外径	適合 鉗子口径	適合 ガイドワイヤ	JANコード
	最大拡張	最大容量						
EXP71820D ディスタルタイプ	18mm	5mL	2000mm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.2mm以上	0.88mm (0.035インチ)	4545367048334
EXP71820P プロキシマルタイプ	18mm	5mL	2000mm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.2mm以上	0.88mm (0.035インチ)	4545367048358
EXP71820P-S プロキシマル スタイレット付タイプ	18mm	5mL	2000mm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.2mm以上	0.88mm (0.035インチ)	4545367048327
EXP71820DM ショートワイヤルーメン ディスタルタイプ	18mm	5mL	2000mm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.7mm以上	0.88mm (0.035インチ)	4545367068165
EXP71820PM ショートワイヤルーメン プロキシマルタイプ	18mm	5mL	2000mm	2.4mm (7F)	1.85mm (5.5F)	3.7mm以上	0.88mm (0.035インチ)	4545367068158

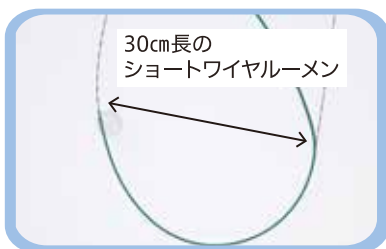


柔軟性とプッシュビリティーを併せ持ち、かつ、ショートワイヤルーメン化することでスムーズで簡便な繰り返しでの結石アプローチを目指した専用設計のカテーテルです。

指向性水流による排石機能(石流しオフセットバルーン)

- 指向性水流が十二指腸側へ向かってらせん状に流れることにより、遺残しやすい中切開以下の乳頭処置後症例や胆泥胆砂に対しての採石性向上を目指しました。
- 3.7mmの内視鏡鉗子チャンネルに適合することで、ガイドワイヤを用いながらも大口径の送水造影ルーメンを実現しました。
- 生理食塩水や造影剤の注入抵抗を低減して、ハイフロー化を図りました。

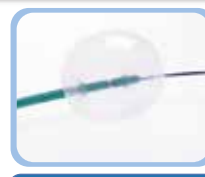

ガイドワイヤ対応

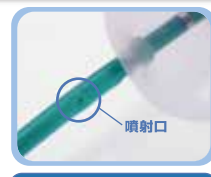

噴射口拡大

品番	バルーン		全長	カテーテル 主部外径	カテーテル 先端部外径	適合 鉗子口径	適合 ガイドワイヤ	JANコード
	最大拡張	最大容量						
EXP71820F 石流しオフセットバルーン	18mm	5mL	2000mm	2.4mm (7F)	2.10mm (6.5F)	3.7mm以上	0.88mm (0.035インチ)	4545367059750

注 意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者において使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品のご使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

■販 売 名:エクストラクションバルーンカテーテル プラス

■認証番号:222ABBZX00075000

■特定保険医療材料分野名及び機能区分:胆道結石除去用カテーテルセット (2)経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーメン の一部

製造販売元

XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。

ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : http://www.zeonmedical.co.jp