

XIEM
EX

キャスバル[®]

Extraction balloon catheter huge

販売名:エクストラクションバルーンカテーテル ヒュージュ



Extraction
balloon catheter **Huge**


ゼオンメディカル株式会社

1本で6mm~30mmまでのバルーンサイズ調整を実現した結石除去用バルーンカテーテル





通常症例から胆管過拡張症例まで

当社独自のバルーン設計により、最小外径6mmから最大外径30mmまでのサイズ調整が可能となり、1本で通常症例から胆管過拡張症例まで幅広い症例への対応を目指したバルーンカテーテルです。

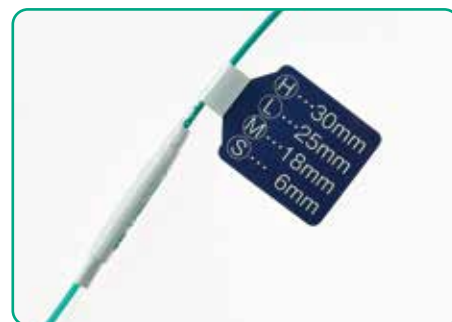

- 最大外径30mm用と18mm用の専用シリンジを使い分けることで、バルーンの微細なサイズコントロールが可能です。
- 遠位側透視用マーカーは常にバルーンが最大外径になる中心部を、近位側透視用マーカーは最大外径30mmに膨らませた際の限界位置を示し、結石に対するポジショニングがしやすいよう工夫されています。

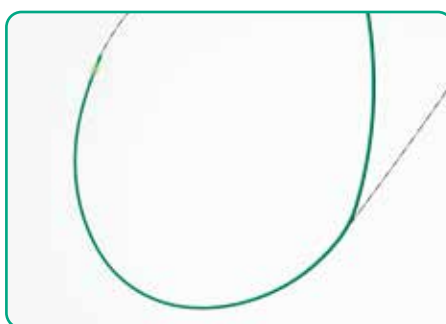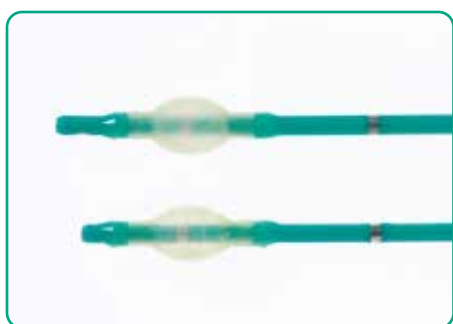

- 柔軟性とプッシュビリティーを併せ持ち、かつ、ショートワイヤルーメン化することでスムーズで簡便な繰り返しでの結石アプローチを目指した専用設計のカテーテルです。

品番	バルーン最大拡張	バルーン最大容量	全長	カテーテル主部外径	適合鉗子口径	適合ガイドワイヤ	JANコード
EXH1 (プロキシマルタイプ)	30mm	18mL	2m	2.4mm (7F)	3.7mm以上	0.88mm (0.035inch)	4545367066659
EXH2 (ディスタルタイプ)	30mm	18mL	2m	2.4mm (7F)	3.7mm以上	0.88mm (0.035inch)	4545367066666

※ショートワイヤルーメンによるガイドワイヤ対応となり、ダイレクト挿入やOTWでの対応は不可となります。

■販売名:エクストラクションバルーンカテーテル ヒュージュ

■愛称:キャスバル®

■認証番号:229ABBZX00058000

■特定保険医療材料分野名及び機能区分:[胆道結石除去用カテーテルセット (2)経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーメンの一部]

注 意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者において使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品のご使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読みください。
- 本品の仕様、外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

XEMEXは日本ゼオン㈱の登録商標です。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

[本 社]〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL:<http://www.zeonmedical.co.jp>