

ゼメックスエントリー

内視鏡的胆道処置用ガイドワイヤー

Endoscopic Guide Wire

For biliary (non-surgical) intervention

Entry
Endoscopic Guide Wire

内視鏡的胆道処置用ガイドワイヤー


先端探り性と狭窄通過性の追求

（内視鏡下での視認性を確保するストライプPTFEジャケット。）

（狭窄部の通過性を向上させる芯直加工されたNi-Ti芯線採用のシャフト部）

（先端探り性を追求した独自のテーパ形状とタングステンコイル）

（最先端部の柔軟性を目指した先端シャフトブランクと二層構造の先端チップ接合部）

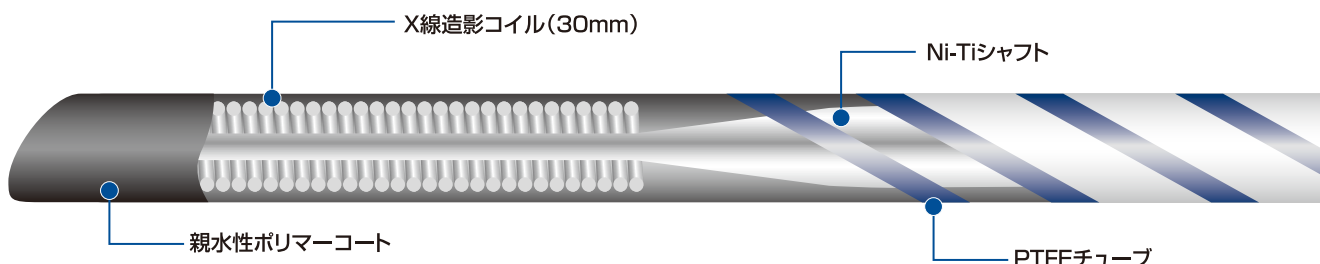

仕様

品番	外径 (mm)	全長 (mm)	親水性樹脂長 (mm)	先端形状	JANコード
GBES3545	0.89 (0.035 inch)	4500	70	ストレート	4545428014353
GBEA3545	0.89 (0.035 inch)	4500	70	アングル	4545428014360
GBES2545	0.64 (0.025 inch)	4500	90	ストレート	4545428014377
GBEA2545	0.64 (0.025 inch)	4500	90	アングル	4545428014384

販売単位: 1本/箱

注意

- 本品のご使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

- 販売名: パイオラックス親水性ガイドワイヤー-LZ
- 認証番号: 21600BZZ00536000
- 特定保険医療材料分野名及び機能区分: 「経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 経鼻法用ワイヤー」

販売元

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>

製造販売元 **PIOLAX**

株式会社 パイオラックス メディカル デバイス

〒245-0053 横浜市戸塚区上矢部町 2265-3