


XIEM
EX

胆管用ステント

ゼオステント V

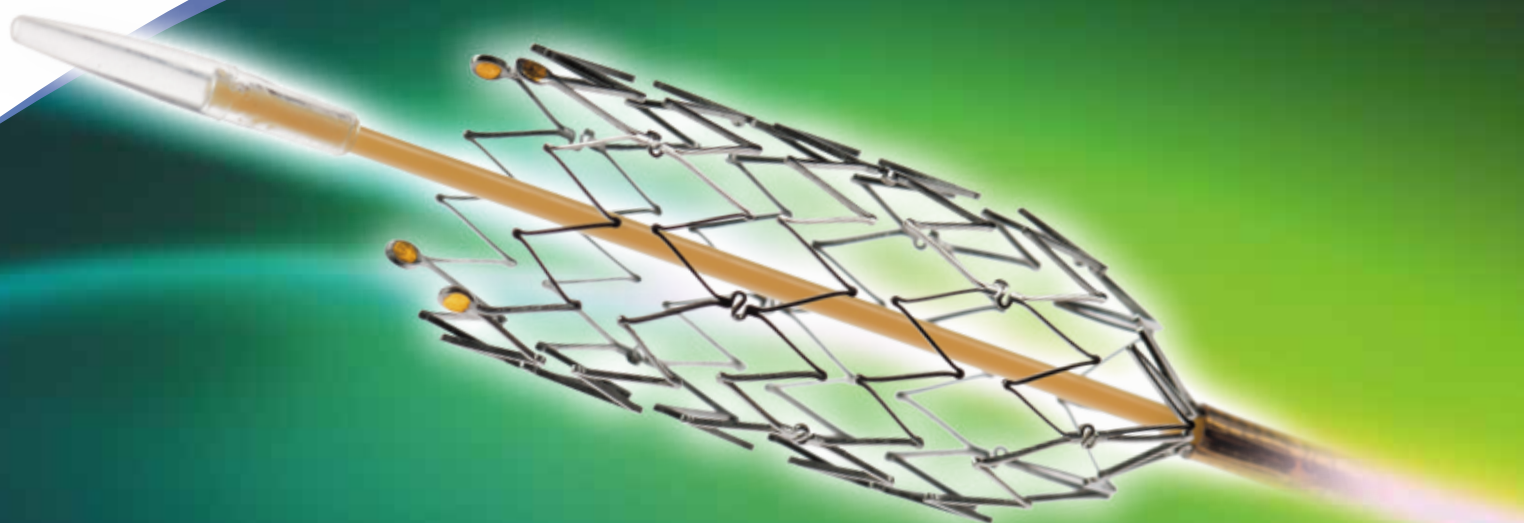


0.025inch 径のガイドワイヤに対応した
5.4F のデリバリーシステム


 ZEO TENT V
Slim for Delivery Innovation

ゼオンメディカル株式会社

- ガイドワイヤと先端チップとの段差が小さくなるように、先端チップをテーパ化しています。
※本製品に適合するガイドワイヤは0.64mm (0.025inch) となります。
- 外径5.4Fの細径デリバリーシステムは、先端を屈曲させた際に生じる<先端チップ-アウター>間の段差が生じにくい設計としています。
- 先端チップに柔軟性を持たせたことで、ガイドワイヤに対するデリバリーシステムの追従性を向上させています。

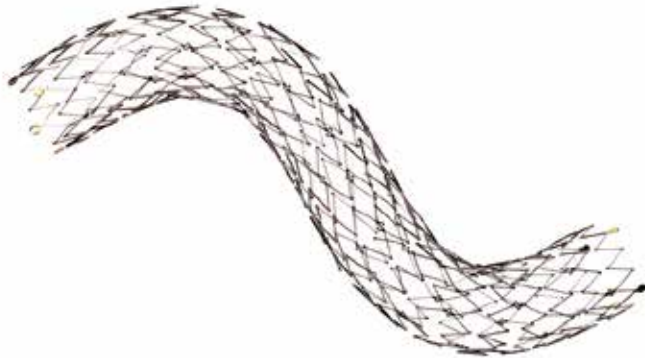

- レーザーカットステントのため、ショートニングはほとんどありません。
- ステント両端にはゴールドマーカを付与しており、X線透視下でのステント視認性をより向上させています。

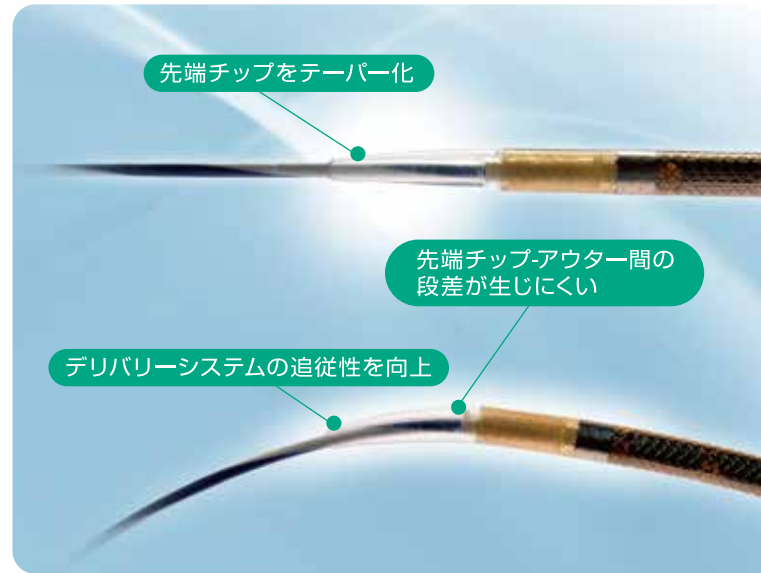

内視鏡 Yコネクタ仕様

品番	ステント径 (mm)	ステント長 (mm)	デリバリー外径 (mm)	デリバリー有効長 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm)	JANコード
ZSVE6006Y	6	60	1.8	2000	0.64 (0.025inch)	4545367066758
ZSVE8006Y		80				4545367066765
ZSVE1006Y		100				4545367066772
ZSVE4008Y	8	40				4545367066789
ZSVE6008Y		60				4545367066796
ZSVE8008Y		80				4545367066802
ZSVE1008Y	10	100				4545367072452
ZSVE4010Y		40				4545367066819
ZSVE6010Y		60				4545367066826
ZSVE8010Y		80				4545367066833
ZSVE1010Y		100				4545367066840

■販売名:ゼオステント V
 ■特定保険医療材料請求分類:[胆道ステントセット 自動装着システム付 永久留置型 カバーなしの一部]
 ■承認番号:22900BZX00237000

注意 本品のご使用に際しては、付属の添付文書を必ずお読み下さい。
 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

XEMEXは日本ゼオン(株)の登録商標です。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社

[本 社] 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
 TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
 URL: <http://www.zeonmedical.co.jp>